


スライドガラスに  
席番と名前を書いてね！



## グラム染色

①

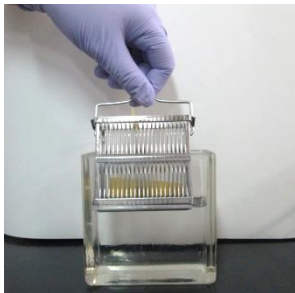


メタノールに浸したあと、  
ドライヤーで乾燥させる

②




せんしよく  
染色液A(青色)をスライドガラス  
に乗せ、約1分間おく

③

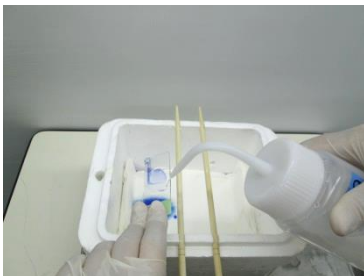


スライドガラスの裏面を  
上に向けて水洗いする

④

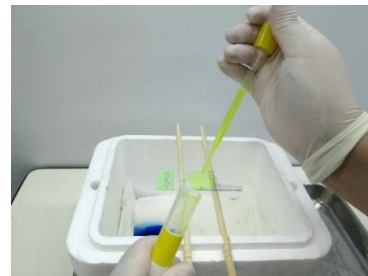

脱色液(黄色)をスライド  
ガラスへかける

⑤

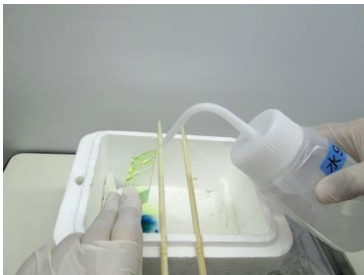


スライドガラスの裏面を  
上に向けて水洗いする

⑥



染色液B(赤色)をスライドガラス  
に乗せ、約1分間おく

⑦

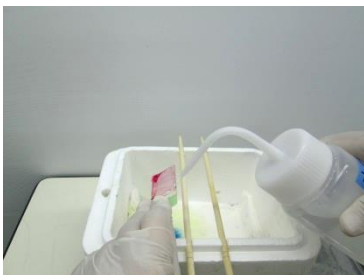

スライドガラスの裏面を  
上に向けて水洗いする



ドライヤーで乾燥後、

けんびきょう  
顕微鏡で見てみよう！

